


Präparationsempfehlungen


Preparation guidelines

Allgemeine Hinweise


General indications

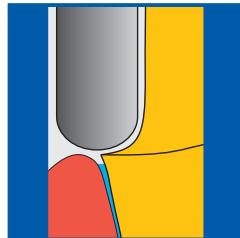

Ausgeprägte Hohlkehlpräparation (90°).
Pronounced chamfer (90°).

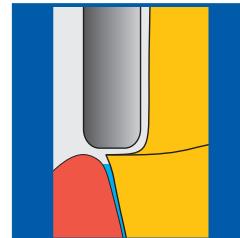


Stufenpräparation mit innen gerundeter Kante.
Shoulder preparation with rounded ario-cervical line angle.

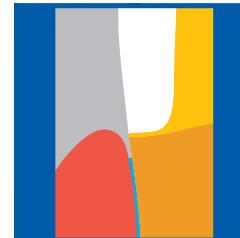


Zirkuläre Schnitttiefe mindestens 1 mm.
Circular marginal cutting at least 1 mm.

Frontzahnrestaurierungen


Anterior preparations

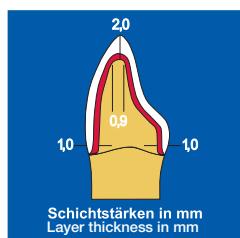

Frontzahnpräparation.
Anterior preparations.

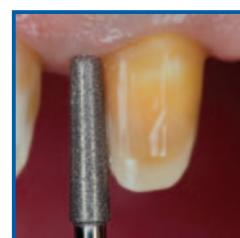


Axiale und inzisale Reduktion.
Axial and incisal reduction.

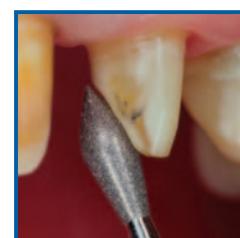

Palatinale Reduktion.
Palatal reduction.

Seitenzahnrestaurierungen


Posterior preparations

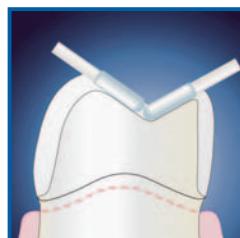

Okklusale Reduktion der anatomischen Form um mindestens 1,5 mm.
Occlusal substance reduction at least 1.5 mm.



Axiale Reduktion der anatomischen Form um mindestens 1 mm.
Axial substance reduction at least 1 mm.

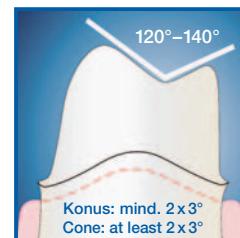

Okklusalfläche im Winkel zwischen 120° und 140°, Konuswinkel der korrespondierenden axialen Flächen 3°–4°.
120°–140° opening angle of the occlusal surfaces. The cone angle of the corresponding axial surfaces should be 3°–4°.